


Einbindung des Zemo VML-GK2 in PegaMed.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo VML-GK2.


1) Starten Sie PegaMed.

2) Gehen Sie über *Einstellungen auf Patient*.

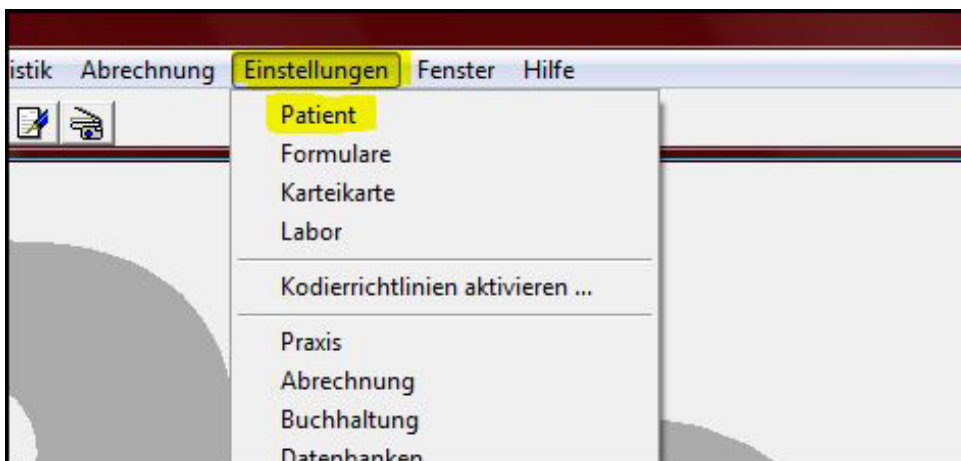

3) Dabei öffnet sich das Fenster *Einstellungen Patient*.

4) Gehen Sie hier auf *KvKarte* und wählen Sie *CT-API Port* und den COM-Port 0. Bei der *CT-API-DLL* geben Sie *ctvml32.dll* ein.

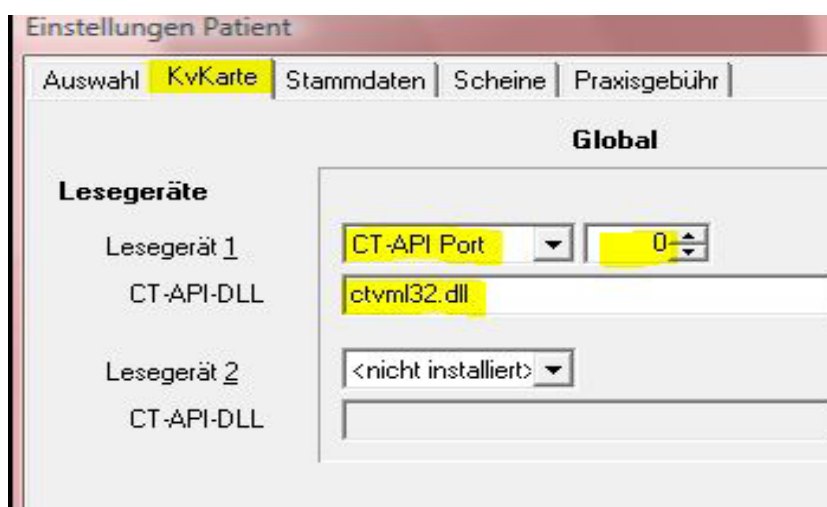

5) Abschließend bestätigen Sie mit *Übernehmen* und beenden mit *OK*.